

# Defibrilátor | iPad CU-SP1

Přinášíme Vám špičkový poloautomatický externí defibrilátor **iPAD CU-SP1** s **předpřipojenými elektrodami** pro snadnější a rychlejší použití. **iPAD CU-SP1** disponuje **reproduktorem** s automatickým přizpůsobením hlasitosti, díky němuž je vhodný také do hlučnějšího prostředí. Jednoduchým přepnutím zvolíme režim pro děti nebo pro dospělé. Hlasové výzvy v českém jazyce dle guidelines 2010.

- PŘEDPŘIPOJENÉ ELEKTRODY
- INDIKÁTOR STAVU BATERIE A EXPIRACE ELEKTROD
- AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ HLASITOSTI
- 1 PÁR ELEKTROD PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
- DETEKCE KPR
- V ČESKÉM JAZYCE



**NYNÍ  
BRAŠNA ZDARMA**

**PRO BEZPLATNÉ PŘEDVEDENÍ NÁS,  
PROSÍM, KONTAKTUJTE**



**POLYMED medical CZ, a.s.**  
Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové  
tel.: 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz


HRADEC KRÁLOVÉ | BRNO

[www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)  
**Sdílejte naše vize.**

# Defibrilátor | iPad CU-SP1

## PŘEDPŘIPOJENÉ ELEKTRODY

- rychlejší a snadnější použití
- zobrazení expiraci elektrod na displeji

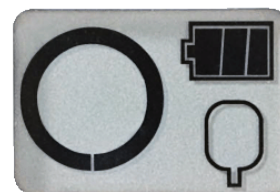

## 1 PÁR ELEKTROD PRO DOSPĚLÉ A DĚTI

- Jednoduché přepnutí režimu pro děti a dospělé bez nutnosti výměny elektrod. Automatické spuštění KPR průvodce pro dospělé nebo děti.



## HLASOVÉ VÝZVY V ČESKÉM JAZYCE

- automatické přizpůsobení hlasitosti v hlučném prostředí
- hlasová průprava detekce KPR
- guidelines 2010
- světelná navigace na přístroji



## SPRÁVA DAT

- Pomocí softwaru lze spravovat data a upravovat záchranný protokol na počítači.
- Vnitřní paměť dokáže uchovat až 5 událostí.
- Data lze přenést pomocí IrDA portu nebo SD karty.

Obj. číslo	Typ
P 04307	Defibrilátor iPad CU-SP1
P 04308	Defibrilační elektrody velké, CU-SP1
P 04309	Defibrilační elektrody malé, CU-SP1

## TECHNICKÉ PARAMETRY

### Energie

Dospělý 150 J, dětský 50 J

### Doba prvního nabíjení

< 8 sekund

### Baterie

Minimálně 200 výbojů

### Expirace elektrod

30 měsíců (od data výroby)

### Komunikace

Hlasové výzvy v českém jazyce

### Uchování a správa dat

Přenos do PC pomocí IrDA a SD karty

Interní paměť na 5 akcí/maximálně 3 hodiny

### Obsah sady

Defibrilátor, elektrody velké (pár), baterie nedobíjitelná



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové  
tel.: 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz

HRADEC KRÁLOVÉ | BRNO

[www.polymed.eu](http://www.polymed.eu)

**Sdílejte naše vize.**