

Immu F6

In Vitro
Diagnostika
IMUNOLOGIE

Chemiluminiscenční
imunoanalyzátor



Imunoanalýzátor Immu F6

+420 495 220 206
www.polymed.cz

P 09088 **1ks**

Automatický chemiluminiscenční imunoanalýzátor Immu F6

Analýzátor POCT přesahující laboratorní standardy kvality.

Vhodný pro urgentní péči, jednotky intenzivní péče, malé laboratoře nebo jako záloha do velkých laboratoří.

Technologie CLIA - spolehlivé výsledky a vysoká citlivost.

Cenově výhodný - jednorázová kazeta bez zbytečného odpadu.

Snadno použitelný - testování z plné krve ve 3 krocích.

Rychlý - 13,5 minuty k prvnímu výsledku.

Jednoduché testování

Ovládání ve třech krocích.

Testování z plné krve, plazmy nebo séra - není potřeba žádná příprava.

Automatické snímání čárových kódů vzorků a reagensů.

Obousměrné připojení LIS/HIS.

Rychlé výsledky

První výsledky za 13,5 minuty - umožňuje rychlejší pracovní postup.

Libovolný přístup

6 nezávislých vzorkovacích pozic.

12 nezávislých pozic testovacích kazet.

Nepřetržitě vkládání bez přerušení.

Pro rutinní testování

Vysoce citlivé výsledky díky chemiluminiscenční technologii Akridinium esteru.

Nízké riziko kontaminace mezi vzorky a reagensy s použitím kazet

a pipetových špiček na jedno použití.



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.

Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Ideální řešení pro urgentní testování

+420 495 220 206
www.polymed.cz



1. Vložení kazety



2. Vložení vzorku



3. Spuštění testu

Nabídka testů

- Anémie**
 - Ferritin, VB12
- Funkce štítné žlázy**
 - TSH, TT4, FT4, FT3, TT3, Anti-TG, TG, Anti-TPO
- Koagulační markery**
 - D-Dimer, FDP, TAT, PIC, tPAI.C, TM
- Srdeční markery**
 - MYO, NT-proBNP, CK-MB, hs-TnI, Lp-PLA2, H-FABP
- Zánětlivé markery**
 - PCT, CRP + hsCRP, IL-6, SAA
- Metabolismus**
 - iPTH, hGH
- Nádorové markery**
 - CA15-3, CEA
- Fertilita a hormony**
 - Total β -hCG, AMH, Progesteron, PRL, LH, FSH
- Poranění mozku**
 - S100, NSE



AKTUÁLNÍ
NABÍDKA
TESTŮ

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Testovací kazeta


+420 495 220 206
www.polymed.cz

1 kazeta = 1 test, **vždy připraven k použití**

Žádné zbytečné plýtvání, jednoduše spravujete a předvídáte svoji spotřebu.

Spotřební materiál

Jednorázová testovací kazeta, jednorázová pipetová špička, sada obecných reagensů (trigger roztok, pre-trigger roztok, promývací roztok) na 50 testů.

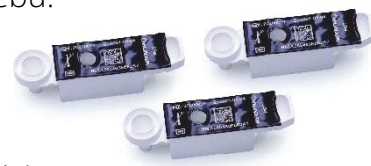

Doporučený minimální objem vzorku ve zkumavce 700 μ l
(600 μ l mrtvý prostor zkumavky + 100 μ l objem testovaného vzorku)

Technická specifikace

Princip	Chemiluminiscenční metoda (Akridinium ester)
Počet pozic na vzorky	6
Počet pozic pro testovací kazety	12
Počet testovacích kanálů	6
Objem vzorku	10 až 100 μ l
Čas dosažení výsledku	Až 6 testů za 15 minut
Výkonnost	Až 24 testů za hodinu
Funkce vzorkování	Monitorování tlaku, inteligentní detekce hladiny kapaliny, bublin a detekce ucpání jehly
Funkce s přidanou hodnotou	Režim STAT, pohotovostní režim 24 hodin, načasované spuštění
Stabilita	± 10 %
Opakovatelnost	≤ 8 %
Lineární závislost	$\geq 0,99$
Míra zbytkové kontaminace	$\leq 2 \cdot 10^{-6}$
Přesnost řízení teploty	Přednastavená hodnota $\pm 0,3$
Self-check	Samočinný test při zapnutí
Kalibrace	Kalibrace ve dvou úrovních s RFID kartou
Displej	12,1" dotykový displej
Tiskárna	Interní termální tiskárna, externí tiskárna volitelná
Rozhraní	4 USB, RJ-45
Připojení	LIS/HIS přes HL7
Rozměry	385 mm (š) x 620 mm (v) x 600 mm (h)
Hmotnost	40 kg



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: helpdesk@polymed.cz

