

Kontinuum péče

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Aerogen může být používán **všemi způsoby** pro **ventilované** i **neventilované** pacienty.
Je vhodný pro **neonatální**, **pediatrické** i **dospělé** pacienty.



AEROGEN Ultra


P 07080 **1ks**

Dodává **více léčiva** za poloviční čas.
Zlepšuje reakci pacienta na léčbu.
Pracuje s **dodatečným kyslíkem** i bez něj.
Může být použit s **maskou** nebo **náustkem**.

Špičková péče o pacienty s Aerogenem ultra



Aerogen Ultra

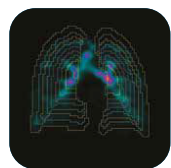

Tryskový nebulizátor

Srovnávací studie s tryskovými nebulizátory dokazují, že použití Aerogenu Ultra mělo za následek

32%

Snížení počtu přijatých pacientů.

85%

Pacientů dosáhlo kontroly symptomů pomocí dávky 2.5 mg Salbutamolu.

37min

Snížení průměrné doby pobytu na urgentním oddělení.

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize




POLYMED medical CZ, a.s.
Petra Jilemnického 14/51, 503 01 Hradec Králové
Tel.: +420 495 220 206 / E-mail: obchod@polymed.cz



Bezplatná edukační školení přímo na **Vašem oddělení...**

AEROGEN.CZ

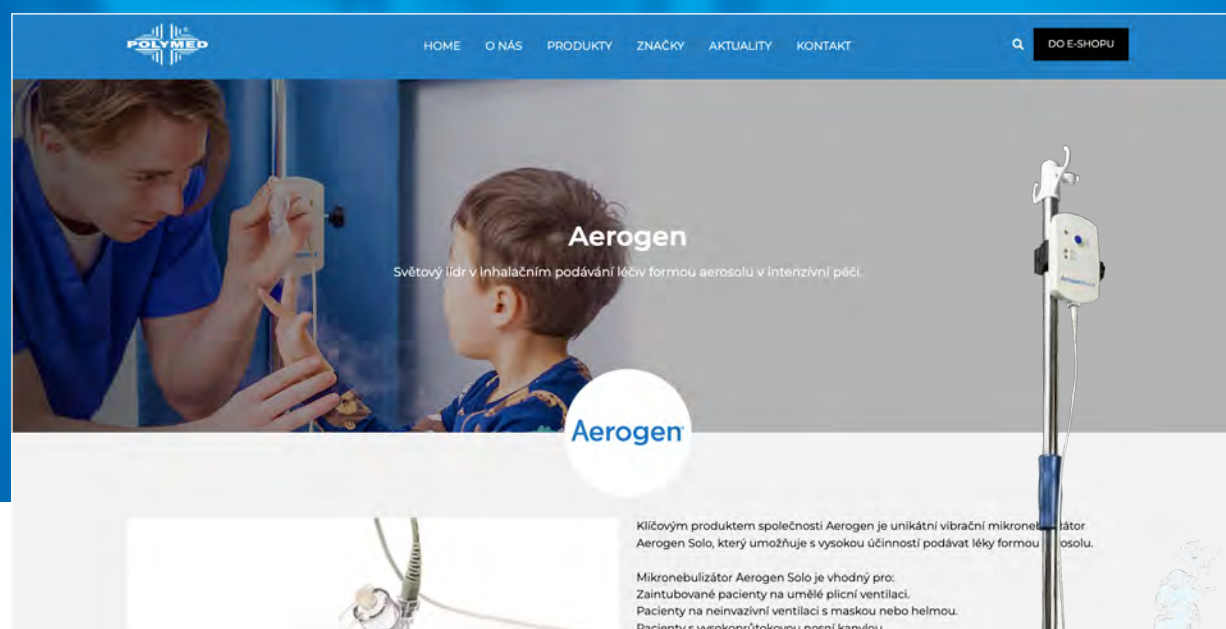

NAVŠTIVTE WWW.AEROGEN.CZ A ZÍSKEJTE VÍCE INFORMACÍ.



+420 495 220 206
www.polymed.cz

AEROGEN

Unikátní vibrační mikronebulizátor
pro podávání léků formou aerosolu



WWW.AEROGEN.CZ

Podávání léků s vysokou účinností

+420 495 220 206
www.polymed.cz



Srdcem každého zařízení **Aerogen** je **unikátní technologie vibrační sítě s palladiem**, která obsahuje unikátní desku o průměru 5 mm ve tvaru kopule perforovanou **více než tisíci** přesně tvarovanými kuželovitými otvory.

Při aplikaci energie deska **vibruje rychlostí 128 000 krát za sekundu a vytváří nízkorychlostní jemné částice**, nebulizovanou mlhu konzistentně velkých kapiček (1-5 µm), čím je dosaženo lepšího ukládání léku v plicích.

AEROGEN Solo

Rychlé a jednoduché nastavení.
Prakticky **tichý**.
Jednorázové použití.

Spolehlivost a důslednost v péči o pacienty

Doplnění léčiva bez **rozpojení okruhů**.
Použití pro všechna léčiva vhodná pro **inhalační podávání**.
Žádné zahřívání nebo degradace léčiva.
Minimální **zbytkový objem** (<0,1 ml pro dávku 3 ml)
Vysoká rychlost podávání.
Neovlivňuje ventilační **parametry**.
Vhodné pro **roztoky, suspenze, proteiny a peptidy**.
Možnost **umístění** na **Y spojku** okruhu nebo na **zvlhčovač**.



Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Souprava pro kontinuální nebulizaci

+420 495 220 206
www.polymed.cz

Možnost kontinuálního podávání léků pomocí speciální stříkačky. Pracuje se standardními injekčními dávkovači. Nestandardní připojení luer eliminuje riziko špatného připojení. Spolehlivé dlouhodobé řízené podávání aerosolu.

Stříkačka pro kontinuální neb. Solo
P 07069 **5ks**



120,-

180,-

Hadička pro kontinuální neb. Solo
P 07068 **5ks**

Ovládací jednotky AEROGEN



19 600,-

Jednotka s integrovanou baterií

Aerogen Pro-X, S
P 07111 **1ks**
Režim 30 minut nebo kontinuální režim.
Vestavěná baterie na 45 minut pro převoz pacienta.



12 600,-

Kompaktní USB jednotka

Aerogen USB, S
P 07076 **1ks**
Režim 30 minut nebo režim 6 hodin.

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize

Komponenty systému Aerogen

+420 495 220 206
www.polymed.cz



1 390,-

**Mikronebulizátor
Aerogen Solo**
P 07070 **1ks**



1 480,-

**Aerogen Solo set (mikronebulizátor
+ T-kus pro dospělé)**
P 07071 **1ks**



98,-

**T-kus pro dospělé,
Solo (22F-22F-22M)**
P 07074 **1ks**



98,-

**T-kus pro děti, Solo
(15F-22F-15M)**
P 07067 **1ks**




98,-

**T-kus pro novorozence,
Solo (10F-22F-10M)**
P 07204 **1ks**



98,-

**T-kus pro novorozence,
F&P okruhy, Solo (12F-22F-12M)**
P 07205 **1ks**

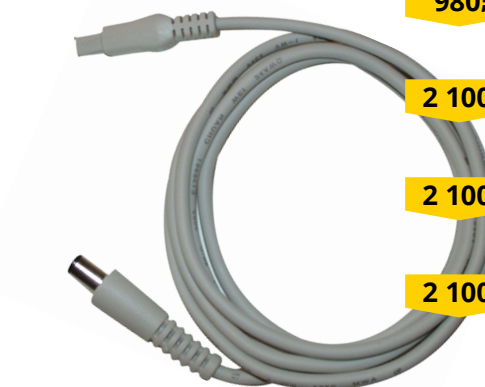

980,-

Kabel propojovací k mikronebulizátoru Aerogen
P 07155 **1ks**

2 100,-

Kabel propojovací k mikronebulizátoru Aerogen, GE
P 07192 **1ks**

2 100,-

Kabel propojovací k mikronebulizátoru Aerogen, HM
P 07193 **1ks**

2 100,-

Kabel propojovací k mikronebulizátoru Aerogen, Mq
P 07194 **1ks**

Platnost akce může být omezena. Za tiskové chyby neručíme.
Tyto slevy nelze kombinovat s jinými slevami či akčními cenami. Uvedené ceny jsou určeny pro konečného spotřebitele.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonné výši.



Sdílejte naše vize